

Ambu® aScope™ 4 Broncho Slim 3.8/1.2

Одноразовый гибкий бронхоскоп



Ключевые преимущества

- Мгновенная доступность
- Отсутствие риска перекрестной контаминации
- Экономичность
- Высокая степень удобства использования
- Четкое и резкое изображение
- Плавная и простая навигация

Ambu® aScope™ 4 Broncho Slim 3.8/1.2

Для однократного применения. Новые возможности

Одноразовый эндоскоп aScope 4 Broncho полностью решает проблему доступности, упрощает процедуру подготовки к исследованию, исключает необходимость выполнения обработки и дезинфекции, также сводит к минимуму риск перекрестной контаминации. Эндоскоп поставляется стерильным, в стерильной упаковке, обеспечивая безопасность пациента и рабочего процесса.

Эндоскоп aScope 4 Broncho Slim обеспечивает высокое качество бронхоскопии для широкого спектра процедур. При подключении к портативному монитору Ambu® aView™ эндоскоп aScope 4 Broncho Slim обеспечивает четкую визуализацию близлежащих и дистальных бронхиальных сегментов. Четкое, резкое изображение и адаптивная регулировка освещенности упрощают обнаружение легочных анатомических структур и навигацию по бронхиальному дереву.

Большие углы изгиба и точное движение сгибаемой части эндоскопа aScope 4 Broncho Slim позволяют легко перемещаться по всем сегментам легкого. Высококачественная рукоятка имеет рифленую поверхность, обеспечивая комфортный захват во время проведения процедуры. Легкая и эргономичная конструкция эндоскопа aScope 4 Broncho Slim обеспечивает простоту эксплуатации.

aScope 4 Broncho Slim имеет наружный диаметр 3,8 мм. Это идеальное решение для широкого спектра бронхоскопических исследований и процедур: от интубации до размещения и манипуляции двухпросветными трубками и бронхиальными блоками в операционной. Сверхтонкая конструкция делает aScope 4 Broncho Slim идеальным для проведения эндотрахеальной (ET) трубки ≥ 5 мм или двухпросветной трубки (DLT) ≥ 37 Fr.

Технические характеристики

Оптическая система	
Поле зрения	85°
Направление обзора	0° прямого видения
Глубина резкости	6–50 мм
Способ освещения	Светодиод
Вводимая часть	
Сгибаемая часть	180° вверх, 180° вниз
Диаметр вводимой части	3,8 мм (0,15")
Диаметр дистального конца	4,2 мм (0,16")
Максимальный диаметр вводимой части	4,3 мм (0,17")
Минимальный размер эндотрахеальной трубки (внутренний диаметр)	5,0 мм
Минимальный размер двухпросветной трубки (внутренний диаметр)	37 Fr
Рабочая длина	600 мм (23,6")
Канал	
Средний внутренний диаметр	1,2 мм (0,047")
Минимальная ширина инструментального канала	1,2 мм (0,047")
Аспирационный коннектор	
Диапазон размеров внутреннего диаметра соединительной трубки	Ø7 мм +/- 1 мм
Рабочая среда, хранение и транспортировка	
Температура — транспортировка	10 ~ 40 °C (50–104 °F)
Температура — рабочая среда	10 ~ 40 °C (50–104 °F)
Температура — хранение	10–25 °C (50–77 °F)
Относительная влажность	30 ~ 85%
Атмосферное давление	80 ~ 109 кПа
Высота	≤ 2000 м
Стерилизация	
Способ стерилизации	Этиленоксид



Ambu® aScope™ 4 Broncho Slim
и Ambu® aView™




Эргономичная и легкая рукоятка,
обеспечивающая надежный
и комфортный захват

Информация для заказа

№ позиции	Кол-во (Ambu® aScope™ 4 Broncho Slim 3.8/1.2)
476001000	5

Проводник
Для крепления шприцев с Луеровским наконечником,
также облегчает введение гибких эндоскопических
принадлежностей через рабочий канал

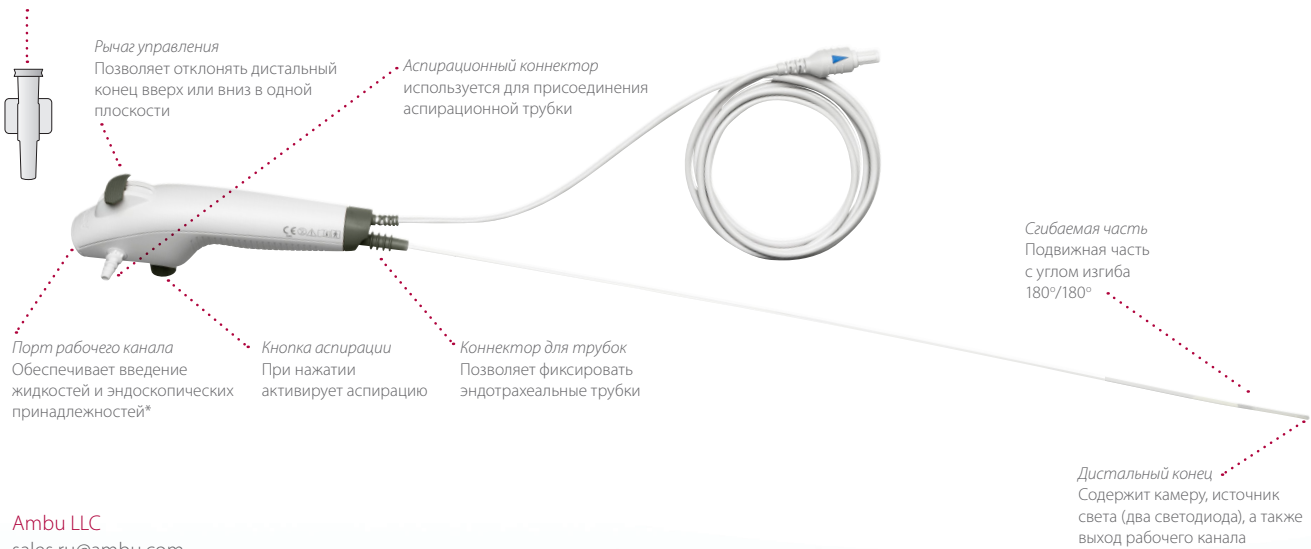

Ambu LLC
sales.ru@ambu.com
Факс: +7 916 377 8788

*Нельзя гарантировать, что принадлежности, выбранные с учетом только минимальной ширины инструментального канала, будут совместимы друг с другом.

